

MESSUNG DER VERUNREINIGUNGEN

HOHER GENAUIGKEIT


SIMPATIC LABO ist ein Laborgerät, mit dem Verunreinigungen mit hoher Genauigkeit ermittelt werden können und zwar :

- an einem Papierblatt (mit Auflicht)
- an einem Zellstoffblatt (mit Durchlicht)

EIN EFFEKTIVES UND ZUVERLÄSSIGES WERKZEUG :

SCHNELLE MESSUNG UND AUSWERTUNG : EINE SERIE VON 10 MUSTERN BENÖTIGT NICHT MEHR ALS 10 MINUTEN.

Kalibrierung des Systems nach EFPG - Vereinbarung (CEN/TC 172).

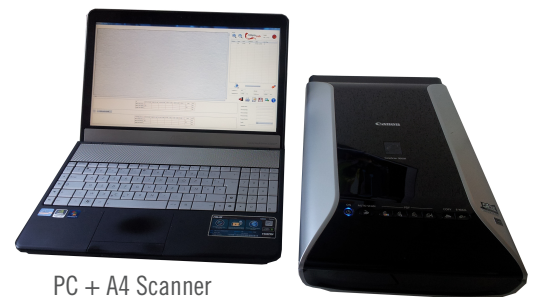

PC + A4 Scanner

| Numero | Type | Surface | Contraste | Classe | Cont. Max |
|--------|------|---------|-----------|---------------|-----------|
| 1 | Buch | 0.087 | 25 | 0.040 / 0.150 | |
| 2 | Buch | 0.024 | 13 | 0.020 / 0.070 | |
| 3 | Buch | 0.202 | 20 | 0.150 / 0.400 | |
| 4 | Buch | 0.087 | 17 | 0.040 / 0.150 | |
| 5 | PB | 0.060 | 24 | 0.040 / 0.150 | |
| 6 | PB | 0.056 | 21 | 0.040 / 0.150 | |
| 7 | PB | 0.056 | 25 | 0.040 / 0.150 | |
| 8 | PB | 0.056 | 21 | 0.040 / 0.150 | |
| 9 | PN | 0.056 | 20 | 0.040 / 0.150 | |
| 10 | PN | 0.056 | 17 | 0.040 / 0.150 | |

| | 0.010 / 0.040 | 0.040 / 0.150 | 0.150 / 0.400 | 0.400 / 1.000 | 1.000 / 5.000 | 5.000 / ... | Somme | Erreur |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|--------|
| 03 | | | | | | | | |
| Black Dots Area | 3 | 112 | 5 | | | | 120 | 18 |
| Black Dots Numb | 146 | 1771 | 18 | | | | 1935 | 18 |
| buchettes | | 37 | 18 | 18 | | | 73 | 100 |

Erkannt werden :

- Schwarze Punkte (63 µ)
- Graue oder weiße Punkte

Eine bedienerfreundliche software

1 FENSTER FÜR DIE MESSUNG

- Individuelle Inspektion eines jeden entdeckten Punkts.
- Ergebnistabelle, Darstellungsart wählbar.

1 FENSTER FÜR DIE PARAMETERVORGABE

- Größenklassen nach ISO .
- 11 Klassen mit wählbarer



TECHPAP SAS

BP 251 - 38044 Grenoble cedex 9 - France
 Tél. +33 (0)4 76 51 74 75 - Fax +33 (0)4 76 42 05 04
 www.techpap.com - techinfo@techpap.com